

耳に入れないのに、本当によく聞こえる!

累計約16万台の大ヒット商品
「みみもとくん」シリーズのEMMケイ電子が開発

年齢を重ねるにつれて、いつのまにか衰えていた聴覚。家族と会話が弾まない。何度も聞き返すのが面倒でイライラ。そんなストレスに、さよならできたら……。業界初の「耳に入れない」集音器（みみもとホンクリア）は、使う人の快適を大切に開発されています。耳の中に入れないから不快感がなく、コードがないので動きもラクラク。なによりも、集音器を使っていることを忘れてしまうほど「自然に聞こえる」から、まるで若い頃に戻ったみたい。家族団らん、友達とお出かけ、夫婦旅行……。
もともとの自分らしさを取り戻して、好きなことを楽しむ、新しい毎日をはじめてみませんか。

いつまでも元気いっぱい!
お出かけを楽しむアクティブシニアにも最適。



業界初!

「自然に聞こえる」と大評判!
耳に入れない集音器
みみもとホンクリア

もっと早く使えばよかった!
一度使ったら、もう手放せない!
8日間試聴無料



補聴器と集音器、どう違うの?

補聴器

- 医療機器に認定されているため、専門店または指定販売店で購入する。
- 専門資格者による検査を受けて購入する。
- 聞こえやフィッティングは都度販売店で調整。
- 両耳購入すると10万円以上と高額。

集音器

- 医療機器の認定が必要ないため、簡単に購入できる。
- 検査を必要とせず、取り扱いも簡単。
- 音量・聞こえをシーンに合わせて、自分で調整できる。



「耳に入れない」＝快適の理由
耳介を利用して「自然な聞こえ」を叶えるからです。

音を「集める」と「聞く」を分けた新構造

自分の声や音が響かない
耳に入れないので、自分の声や食べ物をかむときの音が、体の内側に響くような不快感がありません。

安心して使える

耳の穴をふさがないから、突然大きな音が直撃して、鼓膜を痛める心配もありません。

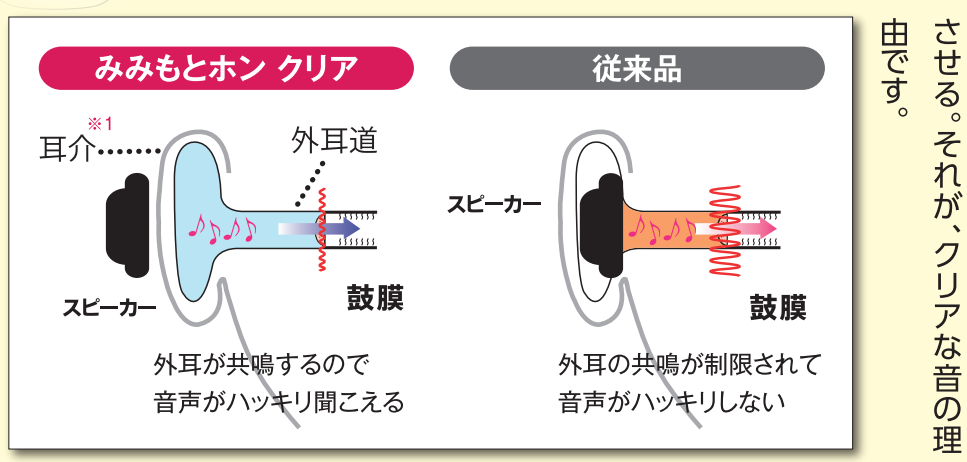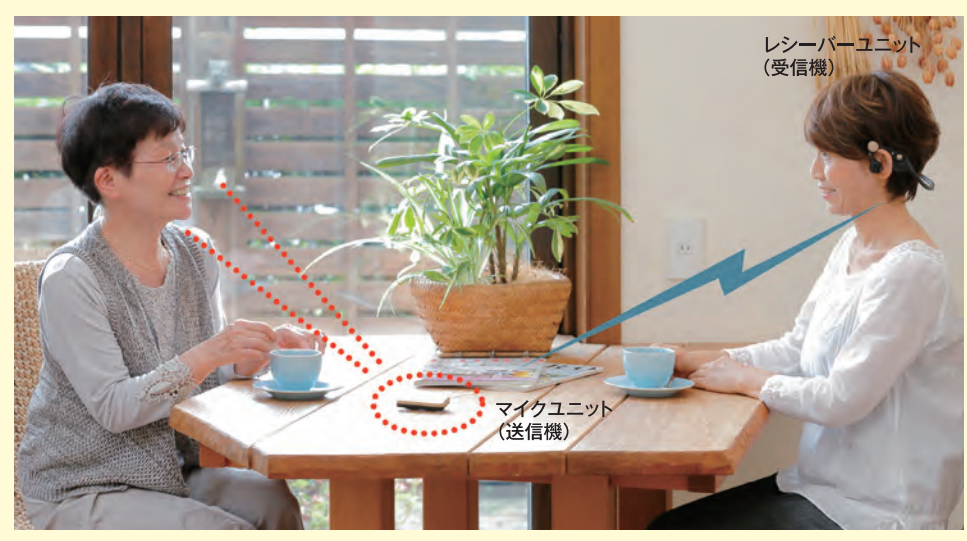

明瞭度試験で正答率約97%。
「ハッキリ聞こえる」を裏付けています。

補聴器や集音器の性能を確かめるために「明瞭度試験」があります。読み上げられた100の単語のうち、いくつ正しく聞き取れるか調べるものです。みみもとホンクリアの正答率は約97%にのぼり、耳をふさぐ形の従来の機器の結果数値をはるかに上回りました。明瞭にハッキリ聞こえるので、使用者からは日常生活に欠かせない機器と伺っています。



医学部 脳神経外科学講座 工学博士 降旗 建治先生



「自然に聞こえる」と大評判! 使い心地も快適に!

不快な音にさよなら

急に大きな音がしないので安心。

金属音や食器の触れる音など、日常生活の中で不快な音を抑えるショックノイズ防止機能を搭載。雷や車のクラクションなど、突然の大きな音も制御します。



コードがないから

コードがないと身動きしやすい!

無線式のコードレスで、送信機と受信機が10メートル離れていても、しっかり音声を送ります。人混みの中でも話し声がハッキリ聞こえるので、出かけのときも便利。送信機は、さりげなくバッグにさげておもしろいです。




送信機
高性能マイク搭載の送信機は、お手元に置くだけで周囲の音を集めます。拾った音をワイヤレス(無線)で受信機に送ります。

ゆっくりリモートで
大事な話も聞き逃さない

ゆっくりリモートを使えば
速めの会話もゆっくりで聞きやすい!

ちょっと聞きとりにくいと思ったら、「ゆっくりスイッチ」をオン。音声の高さは変えることなく、言葉の速度を落として聞き取りやすくするため、相手に気を使わせることなく会話が弾みます。

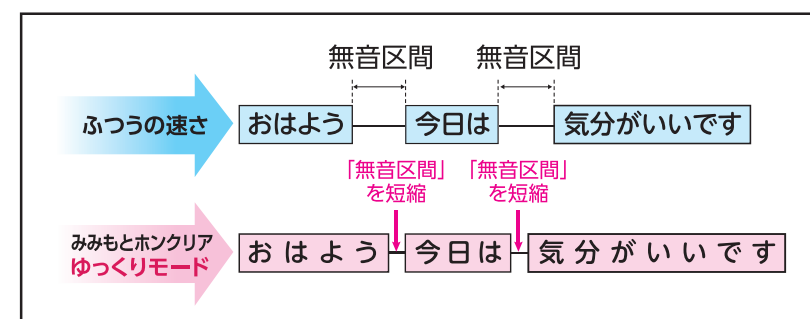

わたし仕様
調節自在

左右の音量・音質を別々に調整できるからお好みの聞こえが見つかります!

送信機は3段階の音質切替スイッチで、自分の聞き取りやすい音質に調整OK。さらに左右バランスも調整できるので、右だけ大きくするなど、人それぞれに対応します。受信機の音量調節は10段階で、きめ細かく調整できます。



送信機 裏側
音質 1 標準
音質 2 高音域を強調
音質 3 中音域+高音域を強調



「みみもとホンクリア」快適の秘密

高性能マイクで音ハッキリ



持ち歩きやすい小型&軽量



2種類のストラップでおしゃれに



超軽量で丈夫な新素材



充電式だからコストも安心



快適な毎日を贈りたいから。大切な方へのプレゼントに!



自然に聞こえるだけで、毎日がこんなに変わるなんて。

“みみもとホンクリア” - 使用者の感想 -

- 60代男性** 会社の会議中、来客対応時などに使用している。よく聞こえるので、物事を判断する時に不安にならない。
- 70代男性** 耳に入れないのが一番いい。耳が蒸れたり痛くなったりしないので、とてもラクです。
- 80代男性** 聞き返すことが少なくなった気がする。
- 70代女性** 台所にいる妻から話しかけられても返事ができる。会話がふえたと思います。
- 60代女性** 今までの集音器より人の声がクリアに聞こえ助かっています。私自身もですが、周囲の友人たちが反応の良さに気付いてくれました。
- 70代女性** マイクを置く場所によって、テレビ用にも使用できて便利です。

お申し込みは、同封のハガキでいますぐ

みみもとホンクリア

税込価格 **48,600円**

送料は当社負担の無料サービス
申込書を出されてから10日前後で商品をお手元へお届けいたします。■荷造り手数料・送料はすべて当社の負担で、日本全国どこへでもお送りいたします。

お支払いは商品が届いてから
代金は商品を受け取った後払い。商品に同封された払込用紙で、郵便局・ゆうちょ銀行コンビニエンスストア(一部除く)より、商品到着後2週間以内にお支払いください(払込手数料別途)。

安心の品質責任保証※2
万一、商品に不備・不良があった場合は、責任をもって取り替えます。
■本商品は聴覚補助具につき、到着後8日間ご視聴いただけます。
その際、お気に召さない場合は、8日以内であれば返品を承ります(返送料はお客様ご負担)。なお、8日を越えた場合は返品をお受けできませんので、予めご了承ください。

〒354-0036 埼玉県富士見市 ぶじみ野東3丁目11番地4
秀朋株式会社 TEL.049-267-3781

みみもとホンクリア 仕様及び付属品

主な仕様
●マイクユニット(送信機)
変調方式:その他の方式 / 送信周波数帯:2.4GHz帯 到達距離:約10m
電源:専用リチウムポリマー充電電池(DC3.7V 850mAh)
連続使用時間:最大約10時間
入力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック
外形寸法:幅42mm×高さ15mm×奥行80mm 質量:約40g
●バッテリーチャージャー(送受信機兼用)
入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 出力電圧:DC5.0V 1A
外形寸法:幅58.5mm×高さ18mm×奥行51.5mm 質量:約40g
●レシーバーユニット(受信機)
受信周波数帯:2.4GHz帯 電源:専用リチウムポリマー充電電池(DC3.7V 260mAh)
連続使用時間:最大約8時間 スピーカー:Φ20mm×2
外形寸法:幅125mm×高さ70mm×奥行163mm 質量:約50g

付属品
①バッテリーチャージャー(送受信機兼用) ②充電ケーブル ③ハンドストラップ ④ネックストラップ ⑤充電用フック ⑥収納ケース

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますので、あらかじめご了承ください。
※カタログと実際の製品とは印刷の関係上、多少異なる場合があります。